

機械器具（06）呼吸補助器
一般医療機器 人工呼吸器用マスク

70564000

ピコネーザルマスク

【警告】

- ・本品は、生命維持換気には適していない。
- ・初めて使用する前に本品を手洗いする。
- ・使用前に、構成品に損傷や摩耗（亀裂、ひび割れ、裂け目、部品の緩み又は飛出しなど）がないか点検する。必要に応じて部品を破棄して交換する。
- ・本品の使用により、皮膚の発赤、刺激、または不快感が起こることがある。このような症状が見られた場合は、使用を中止し、医師に相談する。
- ・本品の使用により、歯や歯茎、顎に痛みが起きたり、既存の歯の症状が悪化したりする可能性がある。症状が現れた場合は、医師に相談する。
- ・本品の使用中または本品を外した後に、次のような症状が現れた場合は、医師に相談する。眼の乾き、眼の痛み、眼の感染症、かすみ目。症状が継続する場合は、医師に相談する。
- ・ヘッドギアのストラップを締め過ぎない。マスクの縁周辺の皮膚の過剰な赤み、ただれ、または膨隆など、締め過ぎの兆候がないか観察する。症状を緩和するには、ヘッドギアのストラップを緩める。
- ・本品は、医師が推奨する CPAP 装置またはバイレベル装置と併用するように設計されている。CPAP 装置またはバイレベル装置の電源がオンの状態で正しく動作しているとき以外は、本品を装着しない。呼吸ポートを塞いだり、密閉しようとしなない。【警告の説明：CPAP 装置は、継続的な排気を可能にする通気孔があるコネクタ付き専用マスクと共に使用する。CPAP 装置の電源がオンになっており、かつ正しく動作しているときは、CPAP 装置からの新鮮なエアフローによって、接続されたマスクの呼吸ポートから呼吸が排出される。ただし、CPAP 装置が動作していないときは、マスクを通じて新鮮な空気が十分供給されず、呼吸を再び吸入してしまう可能性がある。】
- ・装置で酸素を添加する場合、装置が動作していないときには、酸素フローも必ずオフにしなければならない。【警告の説明：装置が動作していないときに酸素フローがオンのままになっていると、人工呼吸器の回路に送られる酸素が装置ケース内に蓄積する可能性がある。装置ケース内に酸素が蓄積すると、火災の危険が生じる。】
- ・添加酸素フローが一定の流量で供給されても、圧設定、患者の呼吸パターン、選択したマスク、リーク量に応じて吸入される酸素濃度が変動する。
- ・CPAP 圧または EPAP 圧が低いと、呼吸ポートのエアフローが不十分になり、呼吸回路から呼吸ガスをすべて除去できない場合がある。多少の再呼吸が起こることがある。
- ・呼吸回路に呼吸具を追加する場合は、圧レベルを調節してその呼吸具により加わるリーク分を補うことが必要な場合もある。


【禁忌・禁止】

- ・本品は、在宅では 1 人の患者に、病院・医療機関では複数の患者に使用する。
- ・本品は、CPAP 治療またはバイレベル治療を処方された患者（体重 30 kg を超える）に使用する。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状、各部の名称

- ・ピコネーザルマスク

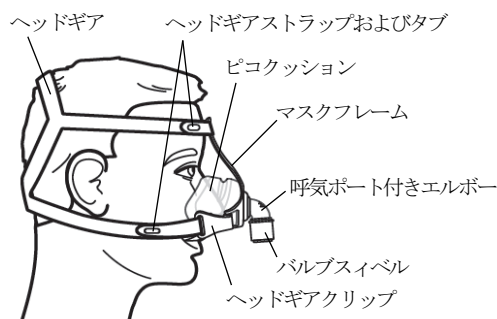

（ピコクッション：サイズ S/M、L、XL より選択可能）

（ヘッドギア：標準サイズのヘッドギア、小さいサイズのヘッドギア RS より選択可能）

2. 作動原理

CPAP 等の装置から送られるガスは呼吸回路を通り、マスクから患者の鼻腔に送られる。患者の呼吸は、呼吸ポートより排気される。

【使用目的、効能又は効果】

本品は、患者に CPAP 治療またはバイレベル治療を行うためのインターフェイスとして使用する。

【品目仕様等】

1. リーク量

- ・呼吸ポートリーク（意図的）

圧力 5 hPa (cmH ₂ O) 負荷時	13.5 SLPM 以上
圧力 10 hPa (cmH ₂ O) 負荷時	20 SLPM 以上
圧力 20 hPa (cmH ₂ O) 負荷時	25 SLPM 以上

- ・トータルリーク（意図的＋非意図的）

圧力 4 hPa (cmH ₂ O) 負荷時	25 SLPM 未満
圧力 5 hPa (cmH ₂ O) 負荷時	25 SLPM 未満
圧力 10 hPa (cmH ₂ O) 負荷時	40 SLPM 未満
圧力 20 hPa (cmH ₂ O) 負荷時	68 SLPM 未満
圧力 30 hPa (cmH ₂ O) 負荷時	93 SLPM 未満

2. 抵抗（圧力低下）

50 SLPM 負荷時	1.2 hPa (cmH ₂ O) 以下
100 SLPM 負荷時	4.7 hPa (cmH ₂ O) 以下

(SLPM: Standard Liters Per Minute)

3. 死腔容積：150mL 以下

【操作方法又は使用方法等】

1. 使用前

- (1) 取扱説明書をよく読んで内容を理解する。
- (2) マスクを手洗いする。
- (3) 全部品に損傷や摩耗がないか点検し、必要に応じて交換する。
- (4) マスク装着前に顔を洗う。
- (5) マスクおよびヘッドギアのサイズを確認する。

2. マスクの装着

- (1) ヘッドギアクリップをマスクフレームより取り外すか、またはヘッドギアストラップのタブをヘッドギアクリップから取り外す。
- (2) クッションを顔にあて、ヘッドギアを頭から被る。
- (3) ヘッドギア頭頂部のストラップを頭の上に合わせる
- (4) 先に外したヘッドギアクリップをマスクフレームに取り付けるか、または、先に外したヘッドギアストラップのタブをヘッドギアクリップに取り付ける。
- (5) ヘッドギアの上部ストラップが左右均等の長さになるよう調整し、次に、下部ストラップも左右均等の長さになるよう調整し、マスク装着を調整する。

3. マスクの使用

- (1) CPAP 等装置の呼吸回路をマスクのバルブスイベルに接続する。
- (2) 体を横にし、装置の電源をオンにして、呼吸する。
- (3) 過度のリーク（空気漏れ）がある場合は、マスクの装着の最終調整を行う。

4. マスクの取り外し

- (1) ヘッドギアクリップを外すか、ヘッドギアストラップのタブを外し、マスク部分を片手でおさえ、もう一方の手でヘッドギアを頭上で前方に滑らせて取り外す。

【使用上の注意】

- ・本品には呼吸ポートが内蔵されているため、別途呼吸具は必要ない。
- ・本品は、天然ゴムラテックスおよびDEHP(フタル酸ビス(2-エチルヘキシル))を含有していない。
- ・使用中にマスククッションやマスクフレーム、呼吸ポート付エルボーを無理に引っ張ったり、捻じったりなどしない。マスククッションやマスクフレーム、呼吸ポート付エルボーに損傷や磨耗（亀裂、ひび割れ、裂け目、部品の外れなど）が発生する可能性がある。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法

- ・温度：-20℃～+60℃
- ・湿度：15%～95%、結露なきこと

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

洗浄方法

1. マスクは初めて使用する前、および1日に1回手洗いする。
2. ヘッドギアは週1回、または必要に応じて手洗いする。
3. 食器用液体中性洗剤を溶かしたぬるま湯でマスクとヘッドギアを手洗いする。
注意：漂白剤、アルコール、漂白剤やアルコールを含む洗剤、コンディショナーやモイスチャライザーを含む洗剤は使用しない。
4. 飲料用水で十分にすすぎ、直射日光を避けて空気乾燥させる。使用前にマスクが乾いていることを確認する。ヘッドギアは平らに置か、吊り干しする。ヘッドギアは乾燥機に入れない。

病院・医療施設で複数の患者に使用する場合は、下記方法で消毒を行う。
警告：ここで示された方法を使用して、布製構成品を消毒することはできない。布製構成品は、複数の患者に使用する前に必ず交換する。

1. 消毒前

洗浄

- ・製品に付属している取扱説明書を参照し、マスクを分解する。
- ・マスクを洗浄するときは、市販の中性食器用洗剤に浸した状態で、毛先の柔らかいブラシを使用して個々の部品から付着物を取り除く。特に隙間や窪みに十分注意して洗浄する。
- ・マスクを飲料用水で十分にすすいでから、直射日光を避けて自然乾燥させる。

2. 消毒

下記のいずれか1つの方法で消毒を最大30回まで行える。

- ・熱：70℃で100分間、75℃で30分間、80℃で10分間、又は90℃で1分間。
- ・消毒剤：デイスオーノ[®] 消毒液 0.55% (Cidex OPA) を使用。

注意：消毒剤の使用に当たっては、消毒剤の添付文書に記載されている内容に従って使用する。消毒剤の添付文書と異なる使用をした場合、本品の性能または耐久性に影響を与えることがある。適用されるすべての警告および使用上の注意を確認し、その指示に従う。

3. 消毒後

- ・損傷や摩耗がないか全部品を点検し、劣化（亀裂、ひび割れ、裂け目など）が明らかな部品は交換する。
- ・飲料用水で十分にすすいでから、直射日光を避けて自然乾燥をさせる。使用前にマスクが乾燥していることを確認する。

【包装】

ピコネーザルマスク：ポリ袋包装1セット入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：フィリップス・レスピロニクス合同会社

住所：埼玉県さいたま市北区宮原町1-825-1

電話番号：0120-633881

製造業者：Respiroics Medical Products (Shenzhen) Co., Ltd.

レスピロニクス メディカル プロダクツ (シェンチェン)

中華人民共和国